

NÁVOD K OBSLUZE



Ocelový Invalidní vozík

Kód výrobku: H011

1. Provedení

Invalidní vozík tvoří ocelový rám s práškovým lakováním. Je vybaven odolným sedákem z nylonu a bavlny černé barvy, polštářem, výškově nastavitelnými a odklopnými područkami, stupačkami, které jsou ve standardní (odklopné) verzi nebo s nastavitelným sklonem. Zadní kola (24") mají ocelové dráty a jsou vybaveny nafukovacími pneumatikami, nebo jsou plná, gumová. Přední kola (8") jsou plná, z gumy se zvýšenou odolností proti opotřebení. Volitelné možnosti: plná gumová zadní kola, stupačky s nastavitelným sklonem, brzda pro doprovod.

Sada obsahuje: rám vozíku se sedákem, pravou stupačku, levou stupačku, bezpečností popruh, pumpičku, sadu montážních klíčů.

Součásti vozíku:


a – madlo

b – výškově nastavitelné područky

c – tlačítko

zarážky

područky

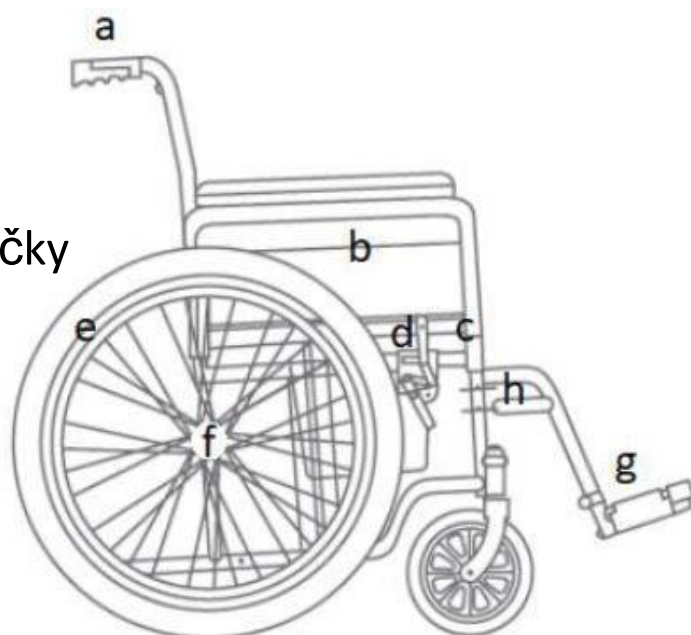

d – bezpečnostní brzda

e- poháněcí obruč

f- rychlospojka

g- stupačka

h – montážní trn stupačky

2. Použití

Ocelový invalidní vozík je pomůcka pro osoby, které se obtížně pohybují, mají pohybové dysfunkci a omezení. Pohyb vozíku zajišťuje uživatel svými rukama, nebo pomocí doprovodu. Vozík je určen k použití ve vnitřních i venkovních prostorech.

3. Montáž

ROZLOŽENÍ A MONTÁŽ

Krok 1. Rozložení vozíku

Postavte vozík na podložku. Pomocí madel vzadu na opěradle vozík rozložte. Pak zatlačte na okraje sedáku zepředu a zezadu tak, aby všechny díly vozíku dosedly.

Krok 2. Montáž stupaček Namontujte pravou a levou stupačku vpředu na hlavní rám jejich nasazením na dva trny a otočením dovnitř, dokud se nezablokují.

Krok 3. Nastavení stupaček Seřídte pravou a levou stupačku pomocí kolíků a zajišťovacího klipu na stupačce. U stupaček s nastavitelným sklonem nastavte pákou úhel sklonu vůči podložce. Stupačky nastavte tak, aby úhel mezi trupem a stehny činil asi 90° (tím bude uživatel v optimální sedící poloze).

Krok 4. Montáž bezpečnostního popruhu Nasaďte bezpečnostní popruh na stupačky. Bezpečnostní popruh slouží k fixaci nohou uživatele, aby za jízdy nesklouzly pod vozík. Vozík nepoužívejte bez nasazeného bezpečnostního popruhu. **Po provedení výše uvedených úkonů je vozík připraven k použití.**

OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU

- Před složením rámu vozíku sklopte stupačky do svislé polohy (kolmo k podložce).
- Rám vozíku složíte jeho uchopením uprostřed vpředu a vzadu a současným zatažením za sedák nahoru tak, aby se rám uvolnil se spojovacích prvků.

FUNKCE ODKLOPENÍ PODRUČEK

- Stiskněte pojistku vpředu u područky a odklopte ji dozadu.
- Područku zajistíte jejím zatlačením dolů, dokud nezacvakne pojistka.

FUNKCE NASTAVENÍ VÝŠKY PODRUČKY

- Výšku područky nastavíte tak, že zatáhněte za zářku, která je na vnitřní straně rámu područky.
- Pak područku zvedněte nahoru nebo zatlačte dolů (nastavování cca 2,5 cm) a uvolněte zářku.

FUNKCE NAFUKOVÁNÍ KOL

- Volitelně může být vozík vybaven 24" nafukovacími zadními koly s průměrem a 8" předními otočnými koly z PU (bezdušové). Vždy systematicky kontrolujte tlak vzduch v obou

kolech. Kontrolujte také stav pneumatik, zda nejsou prodřené, děravé, nebo opotřebené.

- Při huštění pneumatik odšroubujte čepičku ventilku, nasadte na ventil pumpičku (součást dodávky) a pak nafoukejte pneumatiku na požadovaný tlak.

FUNKCE BEZPEČNOSTNÍCH BRZD

- Pokud chcete znehybnit kola, posuňte brzdovou páku dopředu, až se úplně zablokuje (zvláště levé a pravé kolo).

SEŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH BRZD

Aby parkovací brzda fungovala správně, musí být správně seřízená a nastavená. Brzda musí být nastavená tak, aby silně blokovala kolo a ovládání páky nevyžadovalo nadměrnou sílu.

- Při přílišném odporu je nutné posunout brzdu mírně vpřed uvolněním zajišťovacího šroubu na druhé straně brzdy (zevnitř vozíku) a nastavením brzdy v takové poloze, aby chodila lehce a bez odporu.
- Pokud se brzdová zarážka nedotýká celou plochou kola a dostatečně ho neblokuje, postupujte výše popsaným způsobem a posuňte brzdu opačným směrem.

FUNKCE POPRUHŮ PRO UŽIVATELE

Popruh, který je ve standardní výbavě, slouží k fixaci trupu v případech, kdy uživatel sklouzává z vozíku, nebo se sám neudrží ve správné poloze. Popruh se zapíná na přezku.

4. Technická specifikace

Šířka celkem	57-67 cm
Vnější šířka	40, 43, 46, 48, 51 cm
Hloubka celkem	104 cm
Výška sedáku nad podložkou	50 cm

Výška celkem	91 cm (88 cm)
Rozměry sedáku	46, 51 x 40 cm
Hmotnost	18,6-21 kg
Maximální nosnost*	115 kg pro rozměr 48 cm 135 kg pro rozměr 51 cm
Šířka po složení	30 cm
Barva rámu	stříbrná, černá, tmavomodrá

* podle šířky sedáku

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenes odpovědnost za nesprávné používání vozíku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s

6. Mytí a údržba










Systematicky udržujte součásti vozíku:

- Polstrování a polštář lze mýt hadříkem namočeným do studené nebo teplé vody, který ale nebude mokrá, a bez čisticích prostředků. Odolnější skvrny odstraňte houbou. Při údržbě polstrování dávejte pozor, aby nedošlo k jeho nadměrnému navlhnutí. Sušte mimo dosah zdrojů tepla.
- Plastové díly čistěte vlhkým hadříkem, případně přípravky na čištění umělé hmoty. Dodržujte pokyny výrobce a zásady bezpečnosti při používání čisticích prostředků.

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na www.timago.com

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021