


Čtyřkolové chodítko Kód výrobku TGR-R RS 8812

1. Provedení

Čtyřkolové chodítko je vyrobeno z ocelového chromovaného rámu. Je vybaveno pěnovými madly, držákem na kapačku, polstrovanou loketní opěrkou s plynule nastavitelnou výškou, odnímatelným sedátkem a otočnými koly s aretací. Sada obsahuje: rám chodítka s koly, stabilizační horní rám, stabilizační dolní rám, loketní opěrku, sedátko, zajišťovací klipy – 4 ks, motýlkové zajišťovací šrouby – 2 ks

Součásti chodítka:

- a. madlo
- b. loketní opěrka
- c. zajišťovací klip
- d. horní stabilizační rám
- e. dolní stabilizační rám
- f. montážní motýlkový šroub
- g. sedátko
- h. držák na kapačku

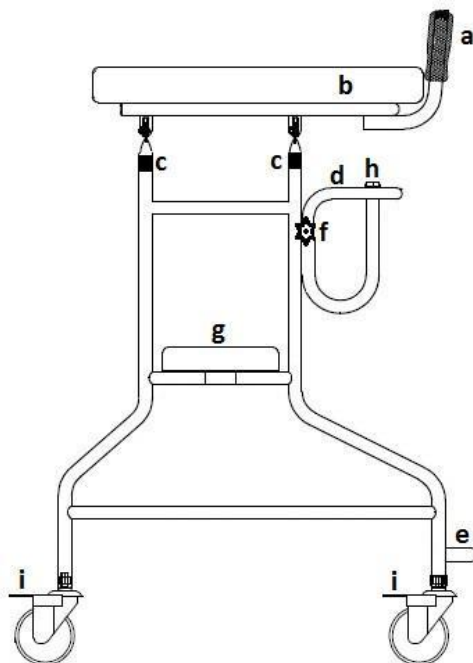

i. brzda

2. Použití

Chodítka je pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují silnou podporu a jištění při vertikalizaci a chůzi. Chodítka je určeno pro pacienty s různým typem pohybových obtíží, s omezenou pohyblivostí a dysfunkcí nebo oslabením dolních končetin. Je vhodné také pro seniory, kterým pomáhá udržovat rovnováhu, zlepšuje komfort při pohybu a zabraňuje pádu. Používání chodítka podporuje obnovení aktivity a vertikalizaci osob s pohybovými obtížemi. Zajišťuje lepší stabilitu, podporu a bezpečí při chůzi.

3. Montáž

Rozložení chodítka

- Postavte rám chodítka na podložku tak, aby dolní stabilizační rám byl na vnější straně. Pak nasadte horní stabilizační rám do montážních otvorů v přední části rámu a fixujte ho montážními šrouby.
- Nasadte loketní opěrku do montážních otvorů rámu chodítka a zajistěte ji zajišťovacími klipy v požadované výšce.
- Sedátko, určené ke krátkému odpočinku, namontujte na dolní část rámu. Při chození s chodítkem zavěste sedátko na vnější částí rámu.
- Případnou kapačku fixujte v montážním otvoru na přední části rámu chodítka.

Funkce brzd

Pozor! Při používání sedátka chodítka bezpodmínečně zabrzdte všemi brzdami.

Nastavení výšky loketní opěrky

Výšku nastavte v takové výšce, aby uživatel chodítka stál tak rovně, jak mu to dovoluje zdravotní stav, s rameny v uvolněné poloze lokty na opěrce. Není vhodné se opírat o chodítko celou váhou těla. Výšku loketní opěrky nastavíte tak, že vytáhnete zajišťovací klip, který je na vnější straně rámu, pak nastavíte požadovanou výšku a nasadíte zpět zajišťovací klip.

4. Technická specifikace

Šířka celkem	63 cm
Hloubka celkem	76 cm
Rozměry sedátka	56 cm x 20 cm
Výška sedátka nad podložkou	54 cm
Nastavení výšky loketní opěrky	101-124 cm
Hmotnost	10,8 kg
Max. nosnost	100 kg

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.










6. Údržba

- Rám chodítka očistěte vlhkým hadříkem a pak ho důkladně osušte.
- Nepoužívejte silné lešticí prostředky, neboť tím může dojít k poškození ochranných nátěrů.
- Průběžně odstraňujte zašpinění pohyblivých dílů chodítka (závěsů, zajišťovacích šroubů, zajišťovacích prvků).

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na : www.timago.com

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021