

NÁVOD K POUŽITÍ

Toaletní židle /

Toaletní židle na kolečkách

Kód produktu: **TGR-R KT 023B / TGR-R KT 023C**




1. Provádění

WC židle je vyrobena z práškově lakovaného ocelového rámu. Model **TGR-R KT 023B** má výškově nastavitelné nohy zakončené gumovými krytkami, zatímco model **TGR-R KT 023C** má nohy zakončené kolečky, z nichž zadní mají brzdu. Židli lze složit a je vybavena toaletním sedátkem s poklopem a snadno zasouvatelnou plastovou toaletní mísou s víkem. Snadné skládání a nastavování umožňuje přizpůsobit křeslo potřebám pacienta a boční područky napomáhají stabilitě a bezpečnosti při používání.

Součásti toaletní židle:

- a. loketní opěrka
- b. záchodové prkénko
- c. záchodová mísa
- d. nastavení výšky
- e. protiskluzové krytky
- f. kolečka (zadní s brzdou)

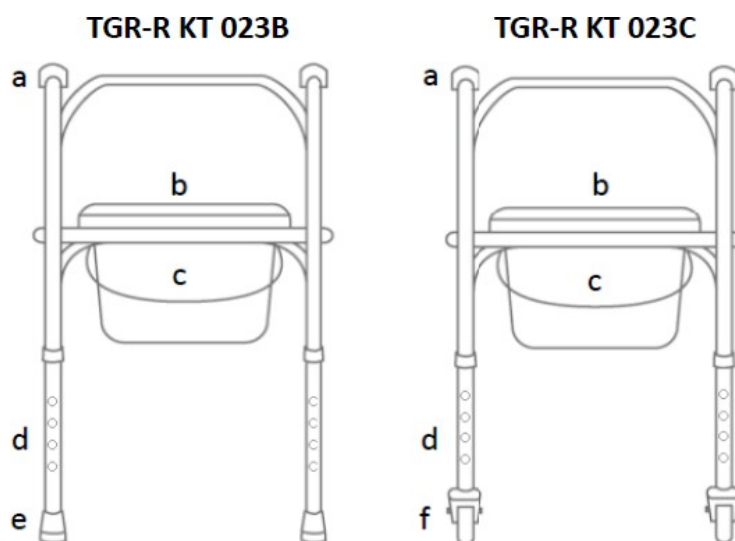

2. Aplikace

Toaletní židle je asistenční zařízení, které pomáhá uživateli provádět fyziologické činnosti. Doporučuje se pro osoby, které mají problémy se samostatným pohybem, s motorickými dysfunkcemi a omezeními a pro osoby, které ztratily schopnost samostatně se posadit a vstát. Židle má funkci toalety díky vybavení toaletní nádobou pod sedadlem. Ta usnadňuje provádění fyziologických a pečovatelských úkonů.

uživatel. Přepavní kolečka umožňují pohodlné přejetí záchodového prkénka po vyjmutí záchodové nádoby.

3. Montáž

Rozkládání a skládání toaletního křesla

- Položte židli na zem. Uchopte plastové rukojeti a rozložte židli a poté sestavte přední část rámu.
- Namontujte záchodové prkénko a klapku na zadní stranu rámu a záchodovou nádobu doprostřed rámu židle.
- Chcete-li křeslo sestavit, vyjměte záchodové prkénko a poklop, poté vytáhněte záchodovou mísu, sklopte přední část rámu a poté jednu stranu vyklopte dopředu a druhou dozadu.

Nastavení výšky

Chcete-li nohy nastavit, zatlačte kovový kolík na noze židle, zvolte požadovanou výšku vnitřní trubky a poté zajistěte vzájemnou polohu trubek. Nohy jsou nastavitelné v krocích po 2,5 cm. **Upozorňujeme, že** kolíky na všech nohách musí být nastaveny ve stejné úrovni. Nohy by měly vždy stát pevně na zemi.

Použijte

Upozornění: při nastupování, vystupování, změně polohy uživatele, stání je nutné zablokovat brzdy. **(platí pro křeslo TGR-R KT 023C).** Zvedněte klapku sedadla a poté sejměte víko kontejneru. Po použití zakryjte nádobu víkem a poté spusťte klapku sedadla.

4. Technické specifikace

Celková šířka	56 cm
Vnitřní šířka	46 cm
Celková hloubka	47 cm
Výška sedadla od země TGR-R KT 023B	41-51 cm
Výška sedadla od země TGR-R KT 023C	43-53 cm

Celková výška od země TGR-R KT 023B	71-81 cm
Celková výška od země TGR-R KT 023C	73-83 cm
Rozměry sedadla	38 cm x 40 cm
Stupnice židle TGR-R KT 023B	6,5 kg
Stupnice židle TGR-R KT 023C	8,0 kg
Maximální zatížení	120 kg
Barva rámu	šedá

5. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

6. Údržba

Provádějte systematickou vlastní kontrolu stavu křesla: pravidelně čistěte toaletní křeslo pouze vodou a jemnými čisticími prostředky. Důkladně je osušte.

K čištění **nepoužívejte následující prostředky**: drsné lešticí prostředky, silné čisticí prostředky, abrazivní prostředky, bělidla, benzín nebo jakákoli rozpouštědla. Po každém použití nádobu a záchodové prkénko vyprázdněte a vydezinfikujte. Používejte čisticí prostředky na WC v souladu s doporučeními jejich výrobce.










7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Záruční údaje

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Uschovejte si prosím doklad o koupi (účtenku nebo fakturu) pro účely záruky.

9. Značky

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo série		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Přečtěte si pokyny
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů. Více informací najdete na www.timago.com

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Společnost s ručením omezeným a partnerství - komanditní společnost

Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2024(IV)