

NÁVOD K POUŽITÍ

Polštář pro otáčení pacienta

Kód produktu: BUBBLE ROLL



1. Provedení

Díky svému anatomickému tvaru a možnosti nastavení pevnosti nafouknutím nebo vyfouknutím vzduchu poskytuje polštář vysokou úroveň pohodlí. Součástí sady je výkonná hustilka. Polštář je vybaven protiskluzovým potahem se zipem a bočními rukojeti pro snadné otáčení pacienta. Díky použití technologie tepelného těsnění je polštář odolný a nerozlepuje se. Skrytý vzduchový ventil zabraňuje náhodnému uvolnění vzduchu a zvyšuje pohodlí.

2. Použití a doporučení

Polštář pro otáčení pacienta je výrobek, který usnadňuje bezpečnou polohu těla při vyšetření nebo terapii. Usnadňuje péči o osoby s omezenou mobilitou, nemocné, starší a zdravotně postižené osoby. Díky své specifické konstrukci dokonale stabilizuje tělo pacienta a umožňuje rehabilitaci a každodenní fungování. Polštář je určen fyzioterapeutům, masérům, zdravotním sestram, lékařům a pečovatelům o nemocné, postižené a starší osoby. Výrobek je vhodný pro použití ve zdravotnických zařízeních a v domácnosti.

Použití:


- Pomoc při otáčení těla pacienta, aniž by ho ošetřovatel musel zvedat.
- Pomoc při péči o nemocné, starší, zdravotně postižené a obézní osoby.
- Pomoc při přesunu na invalidní vozík, židli, do auta, koupelny atd.
- Snížení bolesti pacienta spojené s otáčením na stranu nebo přenášením.
- Prevence proleženin. Pomoc při samostatném cvičení, aby se zabránilo atrofii svalů způsobené dlouhodobým ležením na lůžku.

Nepoužívejte na nahé tělo. Před použitím se poradte se svým lékařem, fyzioterapeutem nebo terapeutem.

3. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávnou údržbu výrobku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

4. Návod k použití

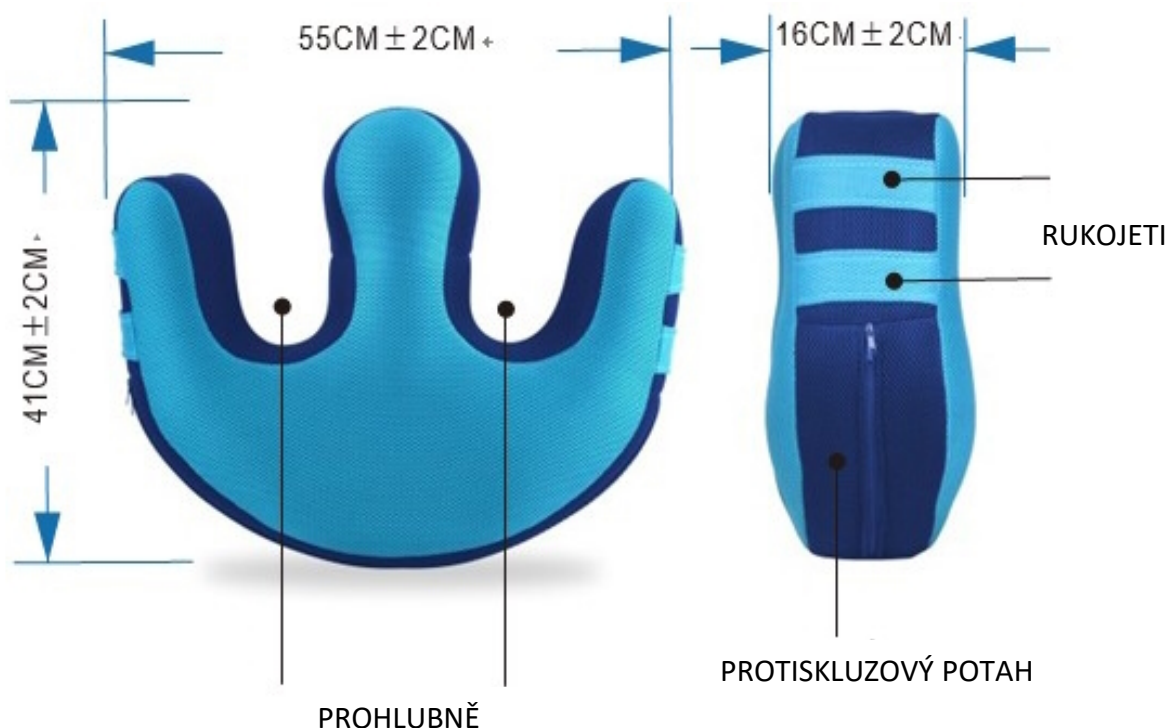

- Nafoukněte polštář (hustilka je součástí balení).
- Položte polštář pod kolena osoby ležící na zádech tak, aby obě prohlubně byly pod kolena pacienta (obr. 1).
- Otočte polštář do svislé polohy (obr. 2).
- Jednou rukou podepřete pacientovu paži a druhou držte rukojeť polštáře a otočte pacienta na bok (obr. 3).
- Po provedení nezbytných ošetrovatelských a hygienických úkonů otočte pacienta zpět na záda a vytáhněte polštář.

5. Technické parametry

Model	BUBBLE ROLL
Rozměry	55 x 41 x 16 cm
Hmotnost	0,44 kg
Protiskluzový	povlak zip
Barva	modrá

6. Údržba

Čištění polštářů:

- Polštář by se měl čistit vlhkým hadříkem s použitím jemných čisticích prostředků, aniž by se namočil. Použití silných čisticích prostředků nebo saponátů může výrobek poškodit. Nepoužívejte abraziva.
- **Pozor!** Při sušení polštáře by se neměly používat zdroje tepla.
- **Pozor!** Při čištění nepoužívejte bělidla, změkčovadla ani přípravky na chemické čištění!

Čištění potahu:

- Potah lze prát ručně nebo v pračce na 40 °C s použitím jemných pracích prostředků. Potah lze sušit proudem teplého vzduchu nebo v sušičce na nízkou teplotu.
- **Pozor!** Potah lze na polštář nasadit až poté, co je zcela suchý. Potah nežehlete!










7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

9. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šárže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů. Více informací najdete na www.timago.com

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa [*Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost*]

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



09/2023 (I)